


Apéndice D. Manual de usuario

- 1.- Tener toda la configuración previa del Apéndice C.
- 2.- Obtener la aplicación en el repositorio, en la parte de reléase última versión y descargar el ejecutable de nombre BodyScan.
- 3.- Abrir la carpeta de descargas y dar doble clic en el ejecutable.
- 4.- Permitir la instalación en la alerta que aparece en pantalla.
- 5.- Se abrirá el asistente de instalación.
- 6.- Seguir las instrucciones que aparecen en el proceso, se recomienda incluir el enlace directo en el escritorio.
- 8.- Una vez terminada la instalación, en caso de haber incluido en el escritorio el enlace directo, dar doble clic sobre el para iniciar la aplicación.
- 7.- Se abrirá la siguiente ventana.



8.- Dar clic en Iniciar, abrir la ventana siguiente.

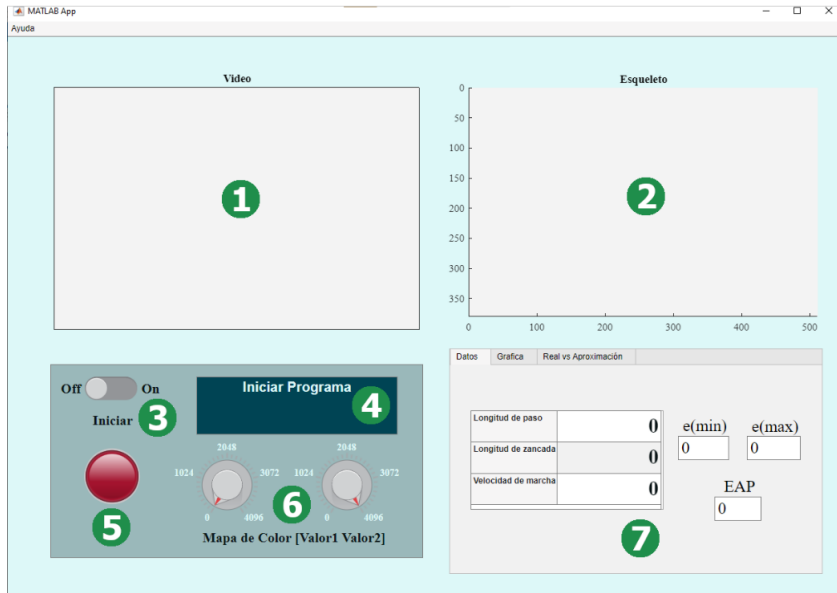

1. espacio para muestra de video de profundidad.
2. ejes para graficar réplica del esqueleto del paciente.
3. switch para control encendido/apagado.
4. Caja de texto para mensajes de funcionamiento.
5. indicador de funcionamiento.
6. perillas para el control de intensidad de color de video.
7. paneles para análisis de datos.

9.- Iniciar la aplicación dando clic en el switch (3).

10.- La aplicación empezara a funcionar.

11.- Para terminar el proceso dar clic en el switch (3).

